

Dati sul diabete e rapporti dettagliati sempre a portata di mano per essere condivisi con il dottore

Come iniziare ad usare l'app mySugr

- 1 Scaricare l'app mySugr dall'[App Store](#) o dal [Google Play Store](#)
- 2 Creare un account mySugr
- 3 attivare la versione **pro di mySugr** per poter creare un rapporto in PDF e utilizzare molte altre funzioni:

Opzione 1

Collegare l'Accu-Chek Guide oppure l'Accu-Chek Mobile, per ottenere accesso illimitato alla **versione pro**.

Aprire la sezione «connessioni» dal menù dell'applicazione mySugr per iniziare il processo di collegamento



Il sistema per misurare la glicemia **Accu-Check Guide** può essere ordinato e testato gratuitamente [QUI](#).

Opzione 2

Senza il misuratore di glicemia Accu-Chek Guide o Accu-Check Mobile la **versione pro** è disponibile per **6 mesi gratuitamente tramite un buono a questo link:**

<https://shop.mysugr.com/de/voucher>



Il codice del buono è **2020-2020-2020**.
(Il codice può essere utilizzato fino al 30 settembre 2020.)

- 4 Importare automaticamente i valori glicemici da Accu-Chek Guide o da Accu-Check Mobile e/o inserire i dati manualmente


Rimanere collegati: rapporti mySugr in PDF da condividere con il dottore

[\(tutorial video\)](#)

Creare un rapporto in PDF e condividere i dati




Scegliere dal menù il pulsante «report»

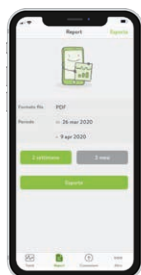

Selezionare il periodo di tempo desiderato e premere «esporta»



Cliccare sull'icona «condividere»

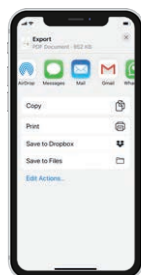

Selezionare l'app con cui si vuole condividere il rapporto



Più di 2 milioni di user registrati.

Valutazione media di 4,6 stelle negli App Stores.

Il nostro team è a disposizione per le domande dei nostri clienti al numero: **0800 803 303**

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE, ACCUCHEK MOBILE e MYSUGR sono marchi di Roche. ©2020 Roche Diabetes Care.