

Diabete - Misurazione continua della glicemia (CGM)

**LIBERTÀ ALLO
STATO PURO!**

**fino a 180 giorni
1 sensore**

eversense[®] XL
Continuous Glucose Monitoring System



Sensore CGM con durata più lunga del mondo.



Avvertimenti affidabili
in caso di ipo/iperglicemia.



Accuratezza e sicurezza
sulle quali si può contare ¹



Liberi dalla sostituzione settimanale del sensore
Sensore con durata fino a 180 giorni inserito professionalmente sotto la cute.

¹ Aronson R, et al.: First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;1-6.

Calibrazione del sistema

Il sistema Eversense CGM necessita di regolari calibrazioni tramite due misurazioni giornaliere della glicemia. In questo modo si mantiene l'elevato grado di precisione per l'intera durata fino a 6 mesi.



Libertà allo stato puro!



SENTI!

Delicato sulla pelle

grazie al cerotto a base di silicone sostituibile ogni giorno.



SOGNA!

Dormire sereni

grazie all'allarme con vibrazione direttamente sul braccio, in caso di ipoglicemia durante la notte.



VIVI!

Una visione d'insieme

mantenere il controllo grazie alle app facili.

Smart transmitter rimovibile e ricaricabile, dotato di allarme con vibrazione

Lo smart transmitter ricaricabile viene fissato con un cerotto alla pelle sopra il sensore e può essere rimosso e riposizionato in qualsiasi momento. In caso di valori di glucosio troppo alti o troppo bassi, il sensore vibra direttamente sul braccio.



Cosa dicono gli utenti Eversense XL in Svizzera²

Precisione e
qualità di vita

Maggiori possi-
bilità di reagire,
particolarmente
di notte.

Allarme con
vibrazione in
caso di ipo/
iperglicemia

L'83%

è soddisfatto del
sistema Eversense


(piuttosto soddisfatti, soddisfatti
e molto soddisfatti)

Possibilità di
rimuovere in
qualsiasi momento
il transmitter

² Due sondaggi online condotti su 57 utilizzatori di Eversense XL in Svizzera nell'aprile 2019

App Eversense CGM: chiara e ordinata

L'app Eversense per smartphone permette di accedere sempre e ovunque ai valori di glucosio, alle tendenze, ai modelli e agli avvisi.


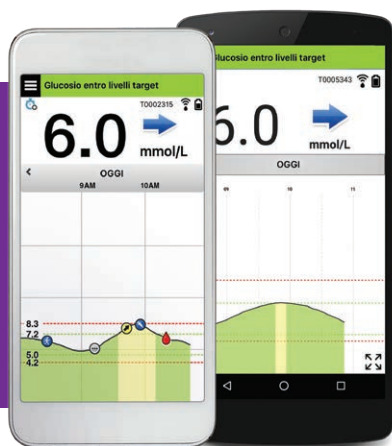


Le app per Eversense XL CGM

App Eversense NOW

L'app Eversense NOW permette ai familiari, agli amici o al team diabetologico - complessivamente fino a cinque persone - di monitorare a distanza l'andamento del glucosio e gli avvisi degli eventi relativi al glucosio.

L'app Eversense NOW per dispositivi iOS è scaricabile gratuitamente dall'App Store. La versione per dispositivi Android è in progettazione.

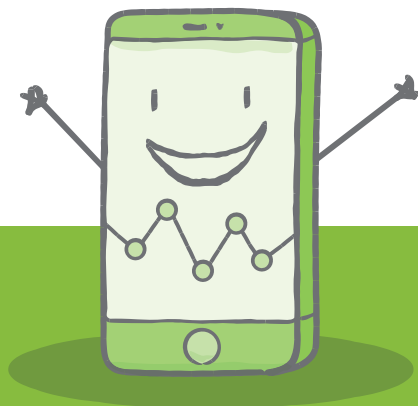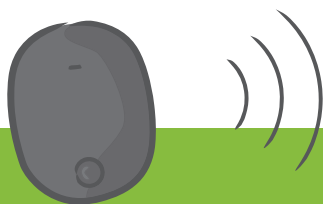

I miei valori, semplicemente nell'app mySugr

In aggiunta alla Eversense Smartphone app è possibile sincronizzare i dati Eversense XL anche automaticamente con la mySugr app e utilizzarli in quella sede.

Colleghi Eversense con mySugr app e riceva gratuitamente accesso alla versione mySugr Pro con molti features interessanti come p. es. la possibilità di aggiungere foto dei pasti e molti esercizi divertenti in relazione al diabete.





Desidera saperne di più?

Il nostro servizio clienti è a sua disposizione: 0800 11 00 11
(lun-ven, 8:00 - 17:00).

Oppure visiti il nostro sito internet
www.accu-chek.ch



Continuous Glucose Monitoring System

Prodotto da Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
844.SENSE4U | 301.515.7260
(844.736.7348)

www.eversensedidiabetes.com



Distribuito da:

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
Tel. 0800 11 00 11

www.accu-chek.ch/eversense

Eversense XL, Eversense XL Continuous Glucose Monitoring, Eversense XL CGM, Eversense XL Sensor, Eversense XL Smart Transmitter, Eversense App and the Eversense XL logo are trademarks of Senseonics, Incorporated. Other brands and their products are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

 0086
Authorized 2016
© Senseonics, Inc., 2018